


URZĄDZENIE DO KRIOCHIRURGII
KRIOPOL K 20 BORA
(UDI 05905610731106)



CE 0197

Zastosowanie

Urządzenie Kriopol K 20 przeznaczone jest do miejscowego zamrażania chorej tkanki. Czynnikiem chłodniczym zapewniającym szybkie i skuteczne zamrażanie jest ciekły azot o temp. -196°C . Zamrożenie tkanki następuje przez kontakt z chłodzoną końcówką roboczą krioaplikatora. Możliwe jest też stosowanie bezpośredniego natrysku ciekłym azotem aplikatorem typu spray. Urządzenie może być wyposażone w dowolny zestaw wymiennych krioaplikatorów co pozwala na jego wykorzystanie w wielu specjalnościach.

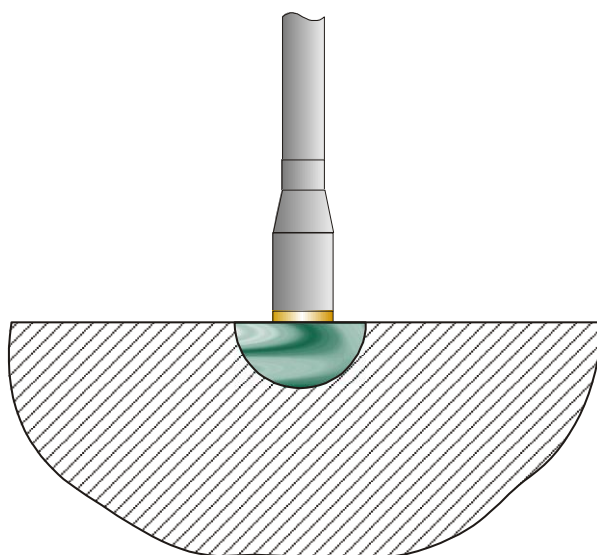

Parametry i opis urządzenia

- Urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie
- Urządzenie wyposażone jest w zbiornik na ciekły azot o poj. 20l (istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zbiorników)
- Posiada elastyczną linię przesyłową ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób wykonywanie zabiegów.
- Przy pracy z krioaplikatorami kontaktowymi posiada możliwość włączenia termoregulacji, co zapewnia mniejsze zużycie ciekłego azotu.
- Urządzenie posiada funkcję rozmrażania aplikatorów
- Urządzenie wyposażone jest w pięć dowolnie wybranych aplikatorów kontaktowych danej specjalności oraz dwa aplikatory typu spray. (istnieje możliwość kupienia dodatkowych aplikatorów wg. cennika)

Dane techniczne

Czynnik chłodniczy	Ciekły azot (LN ₂)
Objętość zbiornika	20 dm ³
Temperatura powierzchni końcówki krioaplikatora (minimalna)	-190°C
Ciśnienie robocze	0,5 bara
Zasilanie	230 V +/- 10 %
Klasa ochronności	II
Typ ochrony	B
Zużycie azotu	6 dkg/min
Wymiary: szerokość/długość/wysokość	420 / 520 / 1100 mm
Masa urządzenia bez azotu:	36 kg
Krioaplikatory 7 szt.	5 szt. kontaktowe, 2 szt. natryskowy

Urządzenie posiada certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG załącznik II oraz deklarację zgodności. Jest zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych.

Gwarancja i serwis


Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta.

Firma zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 60-ciu godz. od momentu przyjęcia urządzenia.


Warunki dostawy i szkolenie

Firma **KRIOMEDPOL Sp. z o.o.** zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia z zakresu obsługi technicznej i medycznej w pełni przygotowując personel do pracy na w/w urządzeniu


Aplikatory dermatologiczne

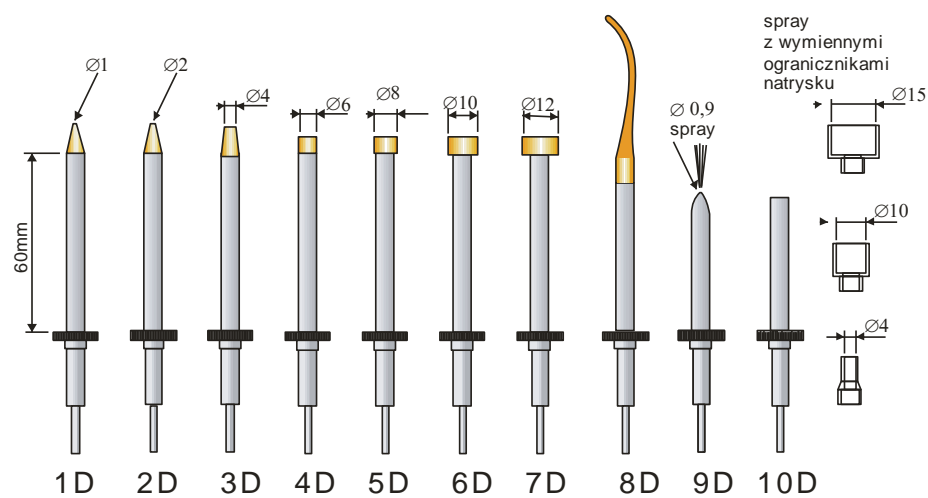


Aplikatory ginekologiczne

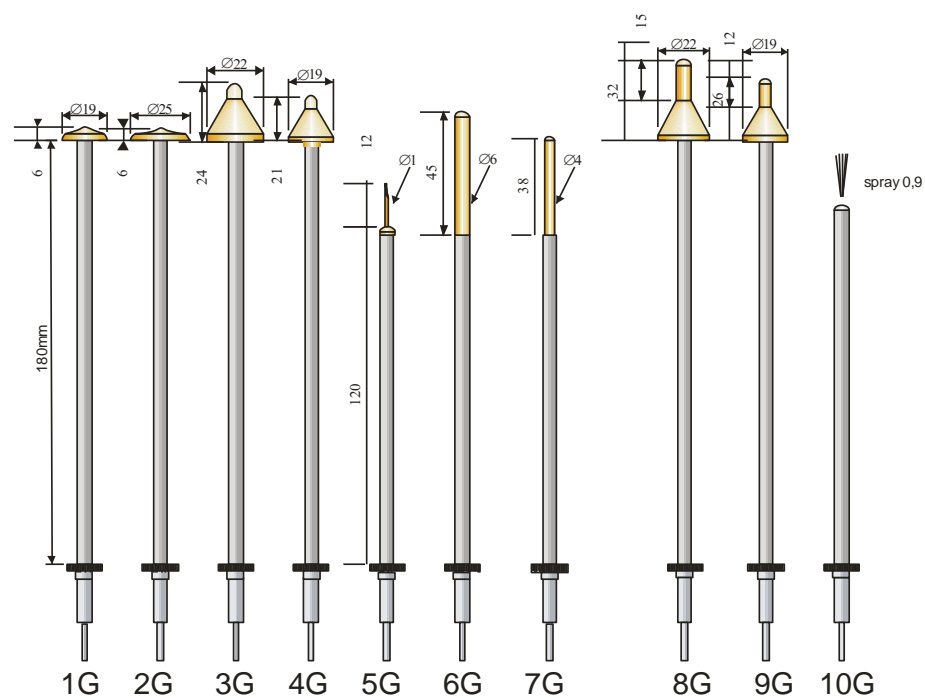

Krioaplikatory Laryngologiczne (nosowe)

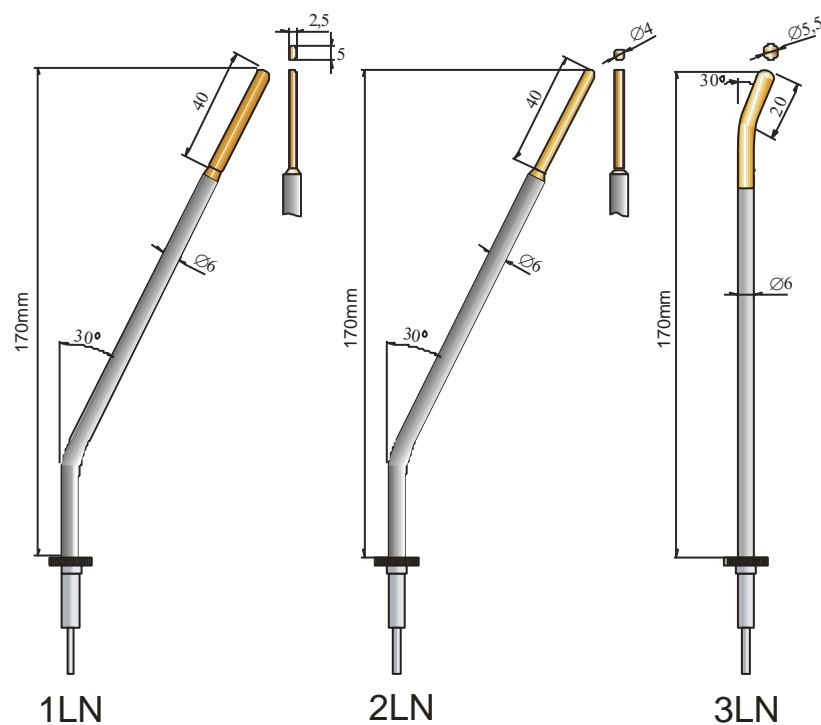

Krioaplikatory Weterynaryjne

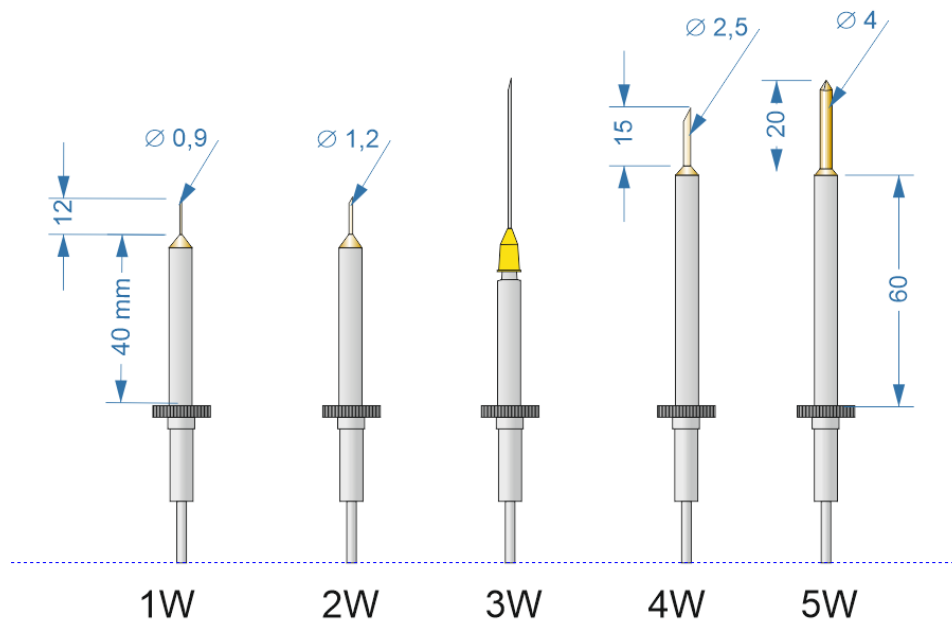

1W, 2W - Aplikator wkłuwany do wymrażania rzęs

3W - Aplikator wkłuwany do wymrażania rzęs z zastosowaniem igieł lekarskich

4W, 5W - Aplikatory wkłuwane

Aplikatory kontaktowe: patrz aplikatory dermatologiczne